



WE 'R' POWERFUL

- ЭФФЕКТИВНА И УДОБНА:
- УПРАВЛЯЕМАЯ СКОРОСТЬ
- БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ ЧИСТКА



НОВАЯ РЕЖУЩАЯ МЕЛЬНИЦА SM 300

ПРЕИМУЩЕСТВА

- мощное измельчение, благодаря 3кВт двигателю с высоким вращающим моментом
 - великолепная адаптация под требования поставленной задачи за счет варьруемой скорости от 700 до 3000 об./мин
 - оптимальный режущий эффект благодаря двойному взаимодействию режущих пластин
 - быстрая и легкая чистка благодаря откидному кожуху с гладкой поверхностью и быстросъемному ротору
 - определенная конечная тонкость с использованием нижних сит с апертурой от 0.25 до 20мм
 - эргономичный дизайн
 - большой выбор аксессуаров
- www.retsch.ru/sm300

- ИДЕАЛЬНА ДЛЯ:
■ ОРГАНИЧЕСКИЕ И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ, ПЛАСТИКИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОТХОДЫ, РЕЗИНА, ДЕРЕВО, КОЖА, КОСТИ, ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО

Retsch®

Solutions in Milling & Sieving

a VERDER company

www.retsch.ru

РЕЖУЩАЯ МЕЛЬНИЦА SM 300

Технические данные	SM 300
Применение	измельчение резанием
Исходный материал	мягкий, среднетвердый, твердый, эластичный, волокнистый
Начальная тонкость*	макс. 60 x 80 мм
Конечная тонкость*	0.25 – 20 мм
Сборный контейнер	5 литров (стандартный), 0.25, 0.5, 26 литров (опционально)

Технические характеристики	
Двигатель	3 фазный с контролем частоты
Тормоз двигателя	есть
Скорость двигателя на 50Гц	700 – 3 000 об./мин
Мощность двигателя	3 000 Вт
Ш x В x Г (без специальных воронок)	прим. 795 x 1 691 x 765 мм
Вес нетто	прим. 160 кг

* в зависимости от материала и настроек прибора

Данные заказа

Режущая мельница SM 300	Артикул
SM 300 поставляется с 5 литровым сборным контейнером из нержавеющей стали и станиной на колесиках (пожалуйста, заказывайте ротор, воронку и нижние сита отдельно)	
SM 300 для 220-230 В, 50/60 Гц, для стандартного измельчения	20.729.0002
SM 300 для 220-230 В, 50/60 Гц, для измельчения без намолта тяжелых металлов	20.729.0005
Версии для других электрических сетей доступны по такой же цене.	
Роторы	для стандартного измельчения без тяжелых металлов
6-дисковый из нержавеющей стали	22.608.0022 из стали St52 22.608.0028
Parallel section rotor из нержавеющей стали	22.608.0021 из стали St52 22.608.0018
Загрузочные воронки	
Стандартная воронка из нержавеющей стали с пластиковым плунжером	22.785.0001
Деревянный плунжер для стандартной воронки	22.725.0011
Алюминиевый плунжер для стандартной воронки	22.725.0012
Длинная воронка из нержавеющей стали	22.408.0003
Нижние сита	
Нижние сита 0.25 – 20 мм из нержавеющей стали или стали St1303	
Другие аксессуары	
Сборник пробы 250/500 мл, включая 2 широкогорлые бутылки	22.003.0008
Сборный контейнер на 26 литров из пластика с фильтровальным рукавом	22.003.0010
Кольцевой фильтр с перфорированной пластиной для 5 литрового контейнера	22.187.0006
Инструмент для извлечения ротора	22.225.0002

Более подробный список аксессуаров Вы найдете на сайте www.retsch.ru

Retsch®

Retsch GmbH
Rheinische Straße 36
42781 Haan, Germany

Telephone +49 21 29 / 55 61 - 0
Telefax +49 21 29 / 87 02


E-mail info@retsch.com
Internet www.retsch.ru

a VERDER company

Эксклюзивный поставщик RETSCH в России ООО «РВС»



Адрес: Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17, здание ГосНИИхиманалит (ст. м. Нарвская)
(812) 320-67-07 (многоканальный), 786-9516, 252-0136, 252-6967
Для писем: 190020 Санкт-Петербург, а/я 220
e-mail: retschi@rvs-ltd.ru, post@rvs-ltd.ru

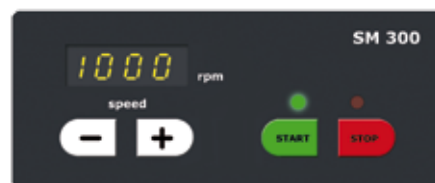

Самая мощная режущая мельница Retsch

Новая мощная режущая мельница SM 300 **особенно подходит для тех случаев**, где другие режущие мельницы не справляются с поставленной задачей. **Высокий вращающий момент** нового двигателя на 3кВт с дополнительной массой махового колеса обеспечивает эффективное измельчение гетерогенных смесей, таких как мусор или электронные компоненты. Аналитическая тонкость часто достигается за один рабочий прогон. Режущая мельница успешно используется для измельчения самых различных материалов. В виду того что проба несильно разогревается во время процесса измельчения, SM 300 подходит и для измельчения термочувствительных материалов.

Другая инновация заключается в **широком диапазоне скоростей от 700 до 3000 об./мин.** В комбинации с большим выбором нижних сит, загрузочных воронок и сборных сосудов мельница может быть легко адаптирована к необходимым требованиям. Другое преимущество заключается в **легкой чистке камеры измельчения**: кожух просто откидывается назад, и сито со съемным ротором вынимаются без использования инструментов.

Новая SM 300 также доступна в специальном исполнении для измельчения проб без намолта тяжелых металлов.

RETSCH – специалист в подготовке проб, предлагает Вам полный ряд оборудования. Пожалуйста, обращайтесь за информацией о наших дробилках, мельницах, просеивающих машинах, прободителях, питателях, а также чистящему и высушивающему оборудованию.